

UBGEN[®] SHELTER[®] MEMBRANA EM PERICÁRDIO BOVINO



SHELTER®

A membrana em pericárdio bovino

- Projetada para cirurgia óssea em odontologia, disponível em diferentes espessuras
- Extremamente resistente à tração, suturável e fixável com pinos
- Produzida em uma cadeia produtiva totalmente italiana, certificada e controlada (CE 0373), por meio de um processo de descelularização padronizado

1. CARACTERÍSTICAS

BIOCOMPATIBILIDADE

Testes realizados de acordo com as diretrizes da norma ISO 10993-5:2009 demonstraram que as membranas SHELTER® possuem comprovadas propriedades de biocompatibilidade e são totalmente livres de elementos exógenos ou citotóxicos.

ESTERILIDADE

É um dispositivo de uso único, esterilizado por raios gama, com estabilidade de 5 anos.

REABSORÇÃO

SHELTER® FAST - reabsorção natural (4-5 semanas)


SHELTER® SLOW - reabsorção lenta com cross-linking (4-6 meses), com efeito de barreira prolongado

2. BENEFÍCIOS

- Facilidade clínica de manuseio e simplicidade de aplicação
- Resistência à tração
- Suporte à angiogênese
- Capacidade quimiotática
- O pericárdio bovino atua como uma barreira natural

3. APLICAÇÕES CLÍNICAS

- Manutenção do alvéolo e da crista óssea
- Cirurgia de elevação do seio maxilar
- Aumento horizontal e vertical em defeitos de 2 paredes
- Deiscências e fenestrações em lesões peri-implantares
- Regeneração periodontal em defeitos intraósseos e defeitos de furca de 2-3 paredes

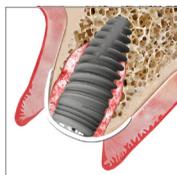

PRODUTO	EMBALAGEM	CÓDIGO
SHELTER® F	Membrana em pericárdio 15x20x0,2 mm	BMF04A
	Membrana em pericárdio 30x25x0,2 mm	BMF04B
	Membrana em pericárdio 50x30x0,2 mm	BMF04C
	Membrana em pericárdio 15x20x0,4 mm	BMF04D
	Membrana em pericárdio 30x25x0,4 mm	BMF04E
	Membrana em pericárdio 50x30x0,4 mm	BMF04F
	Membrana em pericárdio 15x20x0,8 mm	BMF04G
	Membrana em pericárdio 30x25x0,8 mm	BMF04H
	Membrana em pericárdio 50x30x0,8 mm	BMF04I
	Membrana in pericardio 15x20x1 mm	BMF04J
	Membrana em pericárdio 30x25x1 mm	BMF04K
	Membrana em pericárdio 50x30x1 mm	BMF04L
SHELTER® S	Membrana em pericárdio 15x20x0,2 mm	BMS05A
	Membrana em pericárdio 30x25x0,2 mm	BMS05B
	Membrana em pericárdio 50x30x0,2 mm	BMS05C
	Membrana em pericárdio 15x20x0,4 mm	BMS05D
	Membrana em pericárdio 30x25x0,4 mm	BMS05E
	Membrana em pericárdio 50x30x0,4 mm	BMS05F
	Membrana em pericárdio 15x20x0,8 mm	BMS05G
	Membrana em pericárdio 30x25x0,8 mm	BMS05H
	Membrana em pericárdio 50x30x0,8 mm	BMS05I
	Membrana em pericárdio 15x20x1 mm	BMF05J
	Membrana em pericárdio 30x25x1 mm	BMF05K
	Membrana em pericárdio 50x30x1 mm	BMF05L

SHELTER® POR QUE ESCOLHER?

Pela sua extrema facilidade de manuseio e resistência.

A membrana é essencial para estabilizar e proteger o biomaterial enxertado.

Para 90% das intervenções, as membranas reabsorvíveis são indicadas, enquanto nos outros 10%, em que é necessário um efeito de barreira prolongado, geralmente são usadas as membranas não reabsorvíveis, que exigem um segundo procedimento para sua remoção.

Por esse motivo, a UBGEN® também desenvolveu uma variante de membrana reabsorvível com efeito de barreira a longo prazo, sem dúvida a melhor solução para o paciente, evitando o estresse de uma segunda intervenção.

SOLUÇÕES

- Versão SHELTER® FAST com efeito de barreira natural de 4-5 semanas
- Versão SHELTER® SLOW com efeito de barreira a longo prazo, de 4-6 meses

Viale del Lavoro, 14
35010 Vigonza (PD) Italy
T +39 049 628630
info@ubgen.com
ubgen.com

CONSULTE NOSSAS PUBLICAÇÕES
UBGEN.COM

SOLICITE UMA CÓPIA
DO NOSSO LIVRO CIENTÍFICO
COM CASOS CLÍNICOS
MARKETING@UBGEN.COM

